

Proclear® 1 day multifocal

# La réponse pour tous les presbytes

Conçue pour aller au plus près de leurs envies.



\*Vivez Intensément

Live Brightly.\*



CooperVision®

# Plus de satisfaction, c'est aussi plus de succès !

Satisfaire toutes les envies de vos porteurs presbytes grâce aux lentilles Proclear® 1 day multifocal.

## Haute performance

- Vision nette à toutes les distances, y compris en vision de loin.
- Allie sécurité et confort pour les presbytes sujets à la sécheresse oculaire liée à l'âge.

## Simplicité

- Trouver la lentille idéale devient facile :
  - Une gamme qui va à l'essentiel.
  - Une gamme facile à mémoriser.
  - Un équipement simple et rapide.
- Une seule lentille pour tous les presbytes, quel que soit leur âge :
  - Un profil de progression unique.
  - L'option « boost » sur la vision de près.

## Liberté

- Idéale pour tous les modes de port :
  - Tous les jours.
  - De temps en temps.
  - Pour des occasions spéciales.

Proclear® est le seul matériau agréé par la FDA pour améliorer le confort en cas de sécheresse oculaire ou de léger inconfort pendant le port de lentilles.<sup>(1)</sup>



(1) Citation exacte de la FDA : «apporte un meilleur confort aux porteurs de lentilles souffrant d'un léger inconfort ou de sécheresse oculaire lors du port de lentilles», FDA department of health and human services, april 1998, dossier 510K.

# Des porteurs différents Des styles de vie différents

Le nombre de presbytes et leur intérêt pour les lentilles journalières ne cessent d'augmenter.

## Les presbytes ont des styles de vie et des besoins visuels différents

- Porteurs de lentilles journalières qui deviennent presbytes.
- Nouveaux presbytes qui souhaitent profiter de la vie sans lunettes, occasionnellement ou au quotidien.
- Porteurs de verres progressifs qui souhaitent porter des lentilles de contact occasionnellement.
- Presbytes sujets à la sécheresse oculaire liée à l'âge.
- Porteurs de lentilles journalières en monovision qui souhaitent une vision plus naturelle qui respecte la binocularité et la stéréopsie.

---

Répondre aux envies de tous devient possible !


---



# Une approche innovante Une performance tangible


## Vision nette à toutes les distances

- Une géométrie progressive à vision de près centrale.
- Un profil de progression unique :
  - Conçu pour préserver l'acuité en vision de loin.
- L'option « boost » en vision de près :
  - Optimise la vision de près et maintient la vision binoculaire.
  - Permet de suivre les porteurs à tous les stades d'évolution de la presbytie.
- Une expérience visuelle plus naturelle.

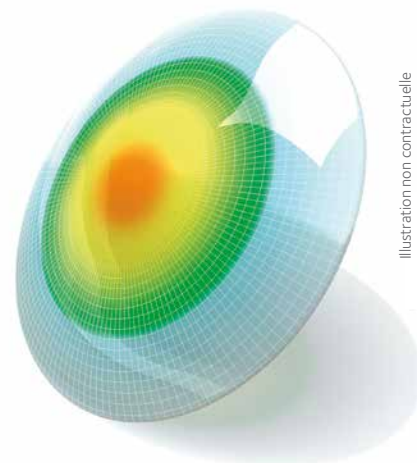

## C'est prouvé cliniquement, les porteurs la préfèrent<sup>(1)</sup>

- Comparée à une lentille multifocale leader du marché, Proclear® 1 day multifocal permet des résultats équivalents en vision de près et équivalents ou supérieurs en vision intermédiaire et vision de loin :
  - Une meilleure acuité visuelle de loin en vision des contrastes élevés.
  - Une meilleure acuité visuelle intermédiaire en vision des faibles contrastes.
  - Une acuité visuelle de près équivalente en vision des contrastes faibles et élevés.

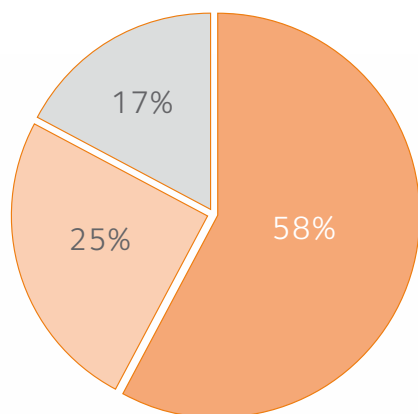

Plus de porteurs préfèrent  
la qualité de vision de  
Proclear® 1 day multifocal<sup>(2)</sup>

- Proclear® 1 day multifocal
- Lentille multifocale A
- Sans préférence

# Confort pour les yeux des presbytes Respect du film lacrymal

Proclear® 1 day multifocal est idéale pour les porteurs presbytes qui sont davantage susceptibles de présenter une sécheresse oculaire liée à l'âge. Grâce à la PC Technology™ intégrée à chaque lentille Proclear®, vos porteurs feront l'expérience d'un confort longue durée, qu'ils optent pour un port quotidien ou occasionnel.

## Bénéfique contre la sécheresse oculaire liée à l'âge

- Création de liaisons préférentielles avec l'eau.
- Résiste naturellement à la déshydratation.
- L'œil reste hydraté pour un meilleur confort.

## Biocompatible avec les tissus oculaires


- La PC (phosphorylcholine) imite les composants naturellement présents dans les membranes cellulaires, notamment les cellules de l'œil humain.
- Maintient l'intégrité du film lacrymal.
- Résistance accrue à l'adhésion à la prolifération des bactéries.

---

Les lentilles Proclear® 1 day multifocal restent hydratées à **96%** toute la journée, même après 12 heures de port

---

La PC Technology™ limite les risques de déshydratation, favorise les flux d'oxygène et réduit les dépôts

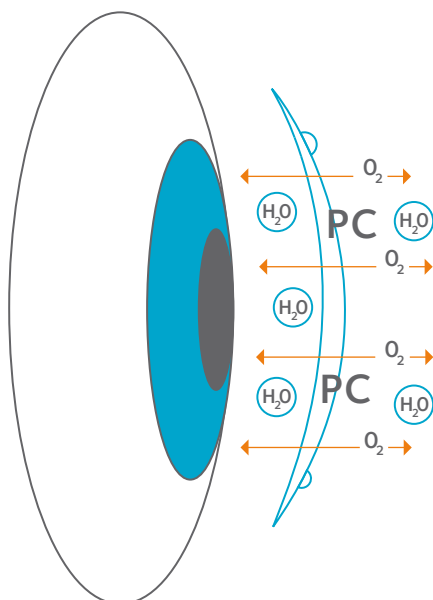

# L'opportunité de répondre à plus de besoins

Proposez **Proclear® 1 day multifocal** au plus grand nombre. Sans entretien et sans contrainte, **Proclear® 1 day multifocal** est le complément indispensable pour s'adapter à toutes les envies du quotidien.

## Haute performance

- Une lentille multifocale performante à toutes les distances.
- Utilise la PC Technology™ :
  - Idéale pour les presbytes, sujets à la sécheresse oculaire liée à l'âge.

## Simplicité

- Trouver la lentille idéale devient facile.
- Pour tous les presbytes, quel que soit leur âge.

## Liberté

- Une modalité de port convenant à tous les styles de vie.

### Caractéristiques

|                        |  |
|------------------------|--|
| Puissances             | De -10,00 à +6,00 D<br>Par 0,25 ; par 0,50 après -6,00 D |
| Addition               | Profil de progression unique avec option « boost »       |
| Rayon                  | 8,70 mm  |
| Diamètre               | 14,20 mm   |
| Matériau               | Omafilcon A<br>HEMA / Phosphorylcholine                  |
| Module d'élasticité    | 0,40 MPa   |
| Teinte de manipulation | Bleutée  |



### Pour plus d'informations

COOPERVISION S.A.S.  
Immeuble "les deux Arcs" - Bât. A & B - 1800 route des Crêtes  
BP 273 - 06905 SOPHIA-ANTIPOLIS Cedex  
Tél. SERVICE CLIENTS : 04 92 96 62 62 ou

**N°Azur 0 810 08 36 67** **N°Vert FAX 0 800 08 62 63**  
PRIX D'APPEL LOCAL APPEL GRATUIT

[www.coopervision.fr](http://www.coopervision.fr)

