

clariti® 1 day toric

Silicone Hydrogel dernière génération

pour vos jeunes porteurs



Les lentilles clariti® 1 day toric ont démontré une **excellente acuité visuelle binoculaire**, en moyenne supérieure à 12/10.¹

Confort
du matin au soir²

Accessible
en prix

Excellente
stabilité³

Bonne
oxygénation⁴

Matériau	Silicone Hydrogel dernière génération, Somofilcon A		
Dk/e_c	57		
Hydrophilie	56 %		
Module d'élasticité	0,5 MPa		
Géométrie	Torique interne, prisme ballast avec allègement sur 360°, 1 trait repère à 6h		
Stabilisation	Ballast avec allègement sur 360°		
Épaisseur e_c	0,105 mm		
Diamètre Ø_T	14,30 mm		
Rayon r₀	8,60 mm		
Gamme	Sphères	Cylindres	Axes
	+0.00D à -6.00D par 0.25D	-0.75, -1.25, -1.75 -2.25	Tous les axes par 10°
	-6.50D à -9.00D par 0.50D	0.75, -1.25, -1.75	10°, 20°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 160°, 170°, 180°
		-2.25	10°, 20°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110°, 120°, 160°, 170°, 180°
+0.25D à +4.00D par 0.25D	-0.75, -1.25, -1.75	10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180°	
Conditionnement	Boîtes de 30 lentilles		
Indication	Astigmatisme		

+742
paramètres

*Avertissement : Les lentilles de contact absorbant les UV ne remplacent pas les lunettes anti-UV, telles que les lunettes de sécurité ou lunettes de soleil anti-UV, car elles ne couvrent pas complètement l'œil et la zone environnante. Les patients doivent continuer à utiliser les lunettes anti-UV qui leur sont prescrites. (1) CVI data on file 2018. Clinical performance study with clariti 1 day toric in UK, n=38. High contrast VA. (2) Une haute teneur en eau associée à la technologie WetLoc™ pour offrir du confort toute la journée. (3) 97% des lentilles de contact étaient stables avec moins de 10° d'écart par rapport à leur position optimum, en moins de 3 min. CooperVision data on file 2018. Clinical performance study with clariti® 1 day toric in UK, 1-week, N=396. (4) Dk/e 57 supérieur au Dk/e de 35 recommandé par Harvitt et Bonanno. Les lentilles de contact clariti® toric sont indiquées pour la correction de la myopie ou de l'hypermétropie, accompagnée d'astigmatisme. Ces lentilles jetables journalières ne doivent être portées qu'une seule fois et doivent être jetées chaque soir. Lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage. Dispositifs médicaux de classe IIa. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE 0088. Fabricant : CooperVision®. Ces dispositifs médicaux ne sont pas pris en charge par l'Assurance Maladie excepté si prescription dans les indications suivantes : kératocône ; astigmatisme irrégulier ; myopie supérieure ou égale à 8 dioptries ; aphakie ; anisométrie à 3 dioptries non corrigées par des lunettes ; strabisme accommodatif. Date de mise à jour : Décembre 2019




CooperVision®

clariti[®] 1 day toric

Zones de transition
DOUCES

Confort et stabilité

Tore interne
+ Prisme ballast

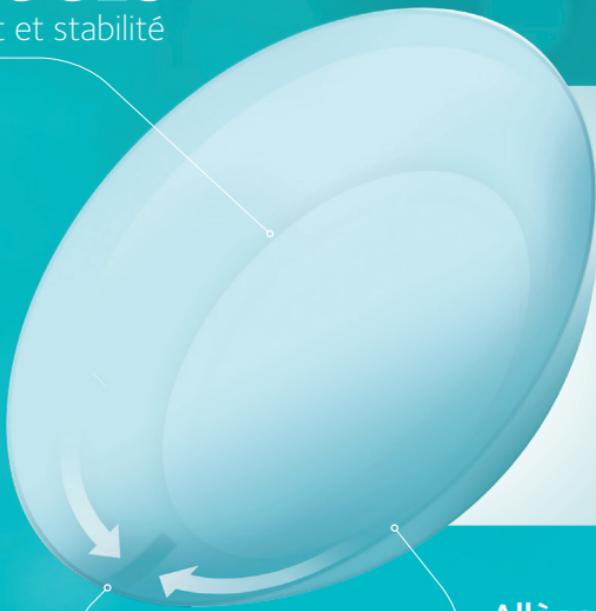

Trait repère
à **6h**

Allègement sur
360°

Confort
Haut Dk/e
en périphérie



EXCELLENTE STABILITÉ

clariti[®] 1 day toric a démontré une excellente stabilité avec 100% des lentilles stabilisées à 10° ou moins par rapport à l'axe.¹

Pensez à OptiExpert[™]

pour choisir la lentille torique en 2 clics.
Mot de passe : biofinity



CooperVision[®]

(1) Philip Morgan. A clinical investigation of the clariti[®] 1 day toric daily disposable contact lens. 2011.