


# MyDay<sup>®</sup> toric

avec Optimised Toric Lens Geometry™

La stabilité de Biofinity<sup>®</sup> toric dans une lentille jetable journalière\*<sup>1</sup>

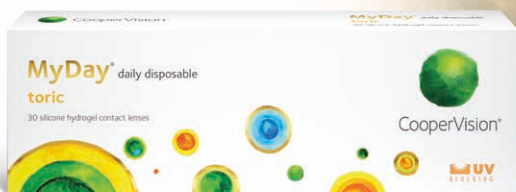

**Excellentes stabilité et qualité de vision**



**Confort longue durée**



**Succès d'adaptation** quant aux caractéristiques d'adaptation et à l'orientation<sup>2</sup>



**La plus large gamme de corrections en jetables journalières toriques<sup>3</sup>**

<b>Matériau</b>	Silicone Hydrogel, Stenfilcon A avec Aquaform <sup>®</sup> Technology		
<b>Dk/e<sup>†</sup></b>	80		
<b>Hydrophilie</b>	54%		
<b>Stabilisation</b>	Torique, Optimised Toric Lens Geometry™ même technologie que Biofinity <sup>®</sup> Toric <sup>§4</sup> 1 trait repère à 6h		
<b>Épaisseur au centre e<sub>c</sub></b>	0,10 mm (@-3D)		
<b>Diamètre Ø<sub>T</sub></b>	14,50 mm		
<b>Rayon R<sub>o</sub></b>	8,60 mm		
<b>Gammes</b>	<b>Sph.</b>	<b>Cyl.</b>	<b>Axes</b>
	-10.00 à -6.50D par 0.50	-0.75	Tous les axes par 10°
	-6,00 à plan par 0.25	-1.25	
	+0.25 à +6,00D par 0.25	-1.75	
	+6.50 à +8.00D par 0.50	-2.25	
<b>Adaptation</b>	Diamètre et rayon uniques		
<b>Renouvellement</b>	Journalier		
<b>Teinte de manip.</b>	Oui		
<b>Filtre UV<sup>‡</sup></b>	Classe 2		
<b>Conditionnement</b>	Boîtes de 30		
<b>Indication</b>	Astigmatisme		

\*Le professionnel de la vue reste seul juge pour déterminer les caractéristiques d'adaptation en fonction de l'œil de chaque patient. †Attention : Les lentilles de contact absorbant les UV ne peuvent se substituer à un équipement de protection oculaire absorbant les UV tel que les lunettes de protection ou les lunettes de soleil absorbant les UV car elles ne couvrent pas l'intégralité de l'œil et la zone environnante. Les patients doivent continuer à utiliser des lunettes absorbant les UV conformément aux instructions qui leur ont été données. ‡(@-3.00DS) x 10<sup>9</sup> [(cm/sec) x (ml O2)/(ml x mmHg)]. § Les lentilles de contact de la famille Biofinity<sup>®</sup> et MyDay<sup>®</sup> partagent la technologie de matériau Aquaform<sup>®</sup>. Les produits sphériques partagent l'Aberration Neutralising System™. Les produits toriques partagent l'Optimised Toric Lens Geometry™. Les technologies optiques multifocales diffèrent. Les lentilles de la famille Biofinity<sup>®</sup> sont un remplacement fréquent et celles de la famille MyDay<sup>®</sup> sont un remplacement journalier. Il appartient au professionnel de la vue d'utiliser son jugement professionnel pour déterminer les caractéristiques d'adaptation en fonction de chaque patient.



CooperVision<sup>®</sup>



CooperVision®

**MYDAY® TORIC**  
 avec Optimised Toric Lens Geometry™

**OPTIMISED TORIC LENS GEOMETRY™**  
 STABILITÉ ET VISION PERFORMANTE
**AVANT**


- 1 Equi-épaisseurs horizontales
- 2 Ballast optimisé

**PROFIL**

(Coupe transversale)



- 3 Ballast en pente douce et continue

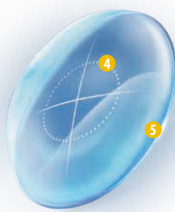**ARRIÈRE**

- 4 Large zone optique torique
- 5 Courbure de la surface arrière conçue pour favoriser un positionnement stable de la lentille


**ROTATION**  
 MOYENNE DE  
**2,25° ± 5**

**RÉORIENTATION**  
 EN MOINS DE 30  
 SECONDES †<sup>5</sup>

**ACUITÉ VISUELLE**  
 DE 10/10 OU  
 PLUS<sup>6</sup>
**AQUAFORM® TECHNOLOGY**

CONFORT DU MATIN AU SOIR †

**1. NATURELLEMENT**  
**MOUILLABLE**
**2. HAUTE TRANSMISSIBILITÉ**  
**À L'OXYGÈNE**
**3. SOUPLÉSSE**

\*Biofinity® toric avec Optimised Toric Lens Geometry™ : 2.25° ± 4.12 de rotation par rapport à la position verticale. †Biofinity® toric avec Optimised Toric Lens Geometry™ : 28.50 ± 16.53 de vitesse de réorientation après une rotation manuelle de 45 degrés. ‡Pendant le port journalier.

Références :

1. Sulley A & Greenaway N. Success rates with a toric soft contact lens design. *Optom Vis Sci* 2020;97[E-abstract] : 205296. 2. Données internes CVI, 2020. Données de performance de 10 études cliniques sur les lentilles dotées de l'Optimised Toric Lens Geometry™ (MyDay® toric, Biofinity® toric, Avaira Vitality® toric), n=836 adaptations. 3. Données internes CooperVision, 2023. Basé sur les combinaisons d'options de prescription (sphère, cylindre, axe) disponibles parmi toutes les lentilles souples toriques jetables journalières de CooperVision, Johnson and Johnson Medical Ltd, Bausch&Lomb Inc. et Alcon Inc. au Royaume Uni, France, Allemagne et Italie en février 2023. Lentilles de contact cosmétiques et photochromatiques exclues. Ne tient pas compte des rayons multiples. 4. Données internes CVI, 2023. 5. Momeni-Moghaddam H et al. Comparison of fitting stability of the different soft toric contact lenses. *CLAE* 2014;37(5):346-350. 6. Données internes CVI, 2020. Revue de la performance de 9 études sur les lentilles de contact souples toriques incluant MyDay® toric, Biofinity® toric et Avaira Vitality® toric ; n=307. Les lentilles de contact souples MyDay® toric (stenfilcon A) sont indiquées pour la correction de la myopie ou de l'hypermétropie, accompagnée d'astigmatisme. Ces lentilles jetables journalières, à usage unique, ne doivent être portées qu'une seule fois et jetées après chaque utilisation. Ne pas dormir avec.

Les lentilles de contact souples Biofinity® toric (comfilcon A) sont indiquées pour la correction de la myopie ou de l'hypermétropie, accompagnée d'astigmatisme. Ces lentilles jetables mensuelles sont à usage journalier, nécessitent un entretien adapté à la fin de la journée et doivent être jetées 1 mois après le début de l'utilisation. Ces lentilles peuvent être portées de façon prolongée (jusqu'à 6 nuits/7 jours d'affilée) uniquement sur avis médical.

Veuillez lire attentivement les instructions figurant sur la notice et l'étiquetage. Pour la liste complète des indications, contre-indications et avertissements, veuillez consulter la notice. Le port de lentilles de contact est possible sous réserve de non-contre-indication médicale au port de lentilles et soumis à une prescription médicale. Dispositifs médicaux de classe IIa. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE0123. Fabricant : CooperVision Manufacturing Ltd. Dispositifs médicaux non pris en charge par l'Assurance Maladie excepté si prescription dans les indications suivantes : astigmatisme irrégulier, myopie ≥ 8,00D, strabisme accommodatif, aphakie, anisométrie à 3,00D, kératocone. COOPERVISION SAS au capital de 71 712€ dont le siège social est situé Immeuble Les 2 Arcs bât B – 1800 Route des Crêtes B.P. 273 – 06905 Sophia Antipolis Cedex, France et immatriculée au RCS de Grasse sous le n°39200221800049. Support à destination des professionnels. Mai 2024. COO-0387-003. Biofinity®, MyDay®, Aquaform® et Optimised Toric Lens Geometry™ sont des marques déposées et des marques commerciales de The Cooper Companies, Inc. et de ses filiales.

© 2024 CooperVision

MDTPOS024. Agence Cinquième Étage, 2/4 Bd Jean Jaures, 45000 Orleans. NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE.



CooperVision®